


[Alle Produkte](#) / [Testcharts](#) / [Auflösungstestbilder](#) / [USAF-1951-Auflösungstestbilder aus UV-Quarzglas \(fluoreszierend und nicht fluoreszierend\)](#)

[Alle 9 Produkte der Produktfamilie](#)

USAF-1951-Auflösungstestbild, 3" x 3", negativ, fluoreszierend

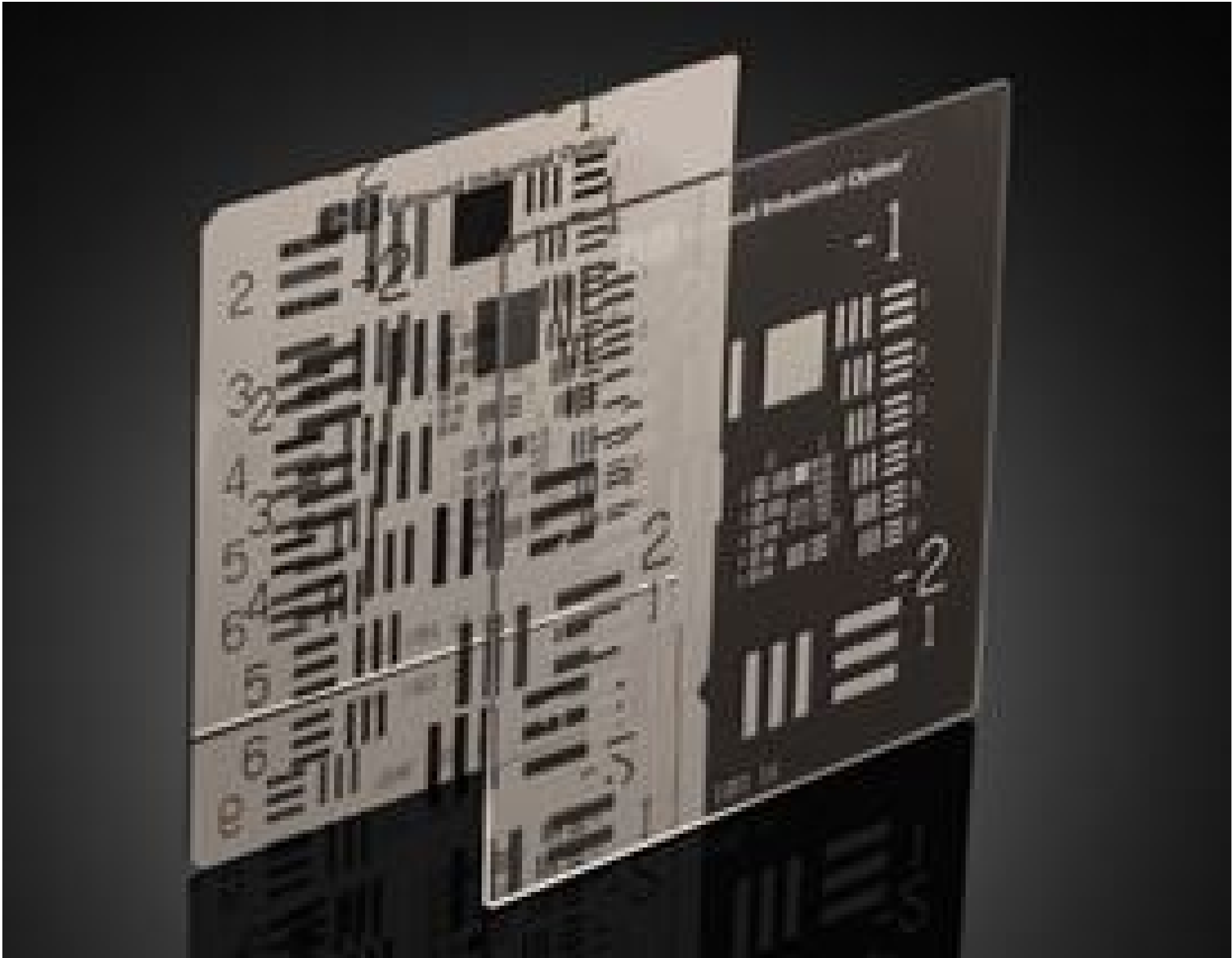

UV Fused Silica and Fluorescent USAF 1951 Resolution Targets

Produkt **#57-893** AUSVERKAUF **1 In Stock**

-

1

+

€515⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€515,00 stückpreis
Stk. 5+	€490,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Negative Fluorescent Target

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

3 x3	Größe (Zoll):
1.20 (1.1 - 1.2)	Dicke (mm):
Optische Eigenschaften	
Fluorescent Material - Peak Excitation @ 365, Peak Emission @ 550	Beschichtung:
UV Fused Silica (Corning 7980)	Substrat:
>3.0	Optische Dichte OD:
Mmimum: Group -2, Element 1, Maximum: Group 7, Element 6	Auflösung:
20-10	Oberflächenqualität:
2λ	Oberflächenebenheit (P-V):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 240:

PRODUKTDDETAILS

Chrome coated top surface will reflect UV radiation. Avoid direct skin contact and eye exposure to UV energy. [UV protective eyewear](#) sold separately. Fluorescent material adds 0.1 - 0.2mm to thickness of fluorescent targets.


- Entwickelt zur Kalibrierung von UV- oder Fluoreszenzmikroskopen
- Fluoreszenztestbilder haben 365 nm Anregungswellenlänge und 550 nm Abstrahlwellenlänge
- Negative, positive und hochauflösende Testbilder erhältlich

Da diese Testbilder aus Quarzglas gefertigt sind, sind sie ideal zur Kalibrierung bildverarbeitender Systeme geeignet, die UV-Beleuchtung verwenden. Sowohl das positive Quarzglastestbild (Chrommuster auf transparentem Hintergrund) als auch das negative Testbild (transparentes Muster auf Chromhintergrund) haben das Chrommuster auf der Vorderfläche.

Die fluoreszierenden Quarzglastestbilder sind ideal für Fluoreszenzanwendungen und konfokale Mikroskopie, Nanotechnologie, Photolithographie und andere bildgebende UV-Systeme. Beim positiven fluoreszierenden Quarzglastestbild (Chrommuster auf fluoreszierendem Hintergrund) ist die Fluoreszenzschicht auf der Vorderseite aufgebracht, während sie beim negativen Testbild (transparentes Muster auf Chromhintergrund) auf der Rückseite des Testbildes ist.

Bitte beachten Sie: Chrombeschichtete Oberflächen reflektieren UV-Strahlung. Vermeiden Sie eine direkte Bestrahlung von Haut und Augen. [UV-Schutzbrillen](#) sind separat erhältlich. Die fluoreszierende Beschichtung erhöht die Dicke der Auflösungstestbilder um 0,1 - 0,2 mm.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

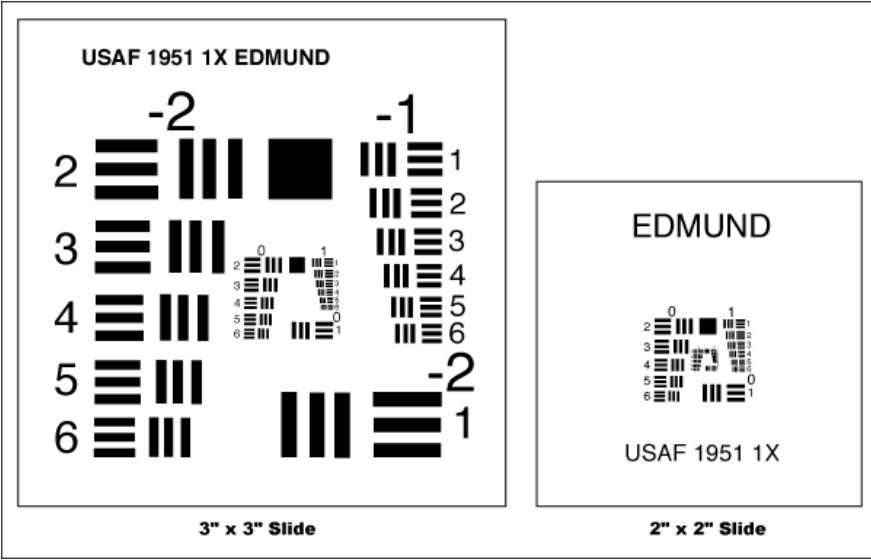

Element	Group Number										For High Res only	
	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0.250	0.500	1.00	2.00	4.00	8.00	16.00	32.0	64.0	128.0	256.0	512.0
2	0.280	0.561	1.12	2.24	4.49	8.98	17.95	36.0	71.8	144.0	287.0	575.0
3	0.315	0.630	1.26	2.52	5.04	10.10	20.16	40.3	80.6	161.0	323.0	645.0
4	0.353	0.707	1.41	2.83	5.66	11.30	22.62	45.3	90.5	181.0	362.0	—
5	0.397	0.793	1.59	3.17	6.35	12.70	25.39	50.8	102.0	203.0	406.0	—
6	0.445	0.891	1.78	3.56	7.13	14.30	28.50	57.0	114.0	228.0	456.0	—

