

Tiefenschärfetester DOF 5-15



DOF 5-15 Depth of Field Target

Produkt **#54-440** **14 In Stock**

-

1

+

€975⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€975,00 stückpreis
Stk. 5+	€927,10 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Durchmesser (mm):	57.00
Größe (mm):	57 H x34 Wx57 D
Aufbau:	Aluminum
Maximale Tiefe (mm):	50.00

Optische Eigenschaften	
Black on White-Backed Film	Substrat:
5 and 15 lp/mm Scale (both Horizontal and Vertical)	Auflösung:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 240:


Produktdetails

- Testen Sie die Tiefenschärfe Ihres bildgebenden Systems
 - Effektive Messung macht Berechnung überflüssig
- Der Tiefenschärfetester DOF 5-15 wurde entwickelt, um eine optische Größe zu standardisieren, die meist theoretisch bestimmt wird. Das Design optischer Systeme erfordert genaue Spezifikationen für die Tiefenschärfe. Mit diesem Testbild können ungenaue und verwirrende Tiefenschärfeberechnungen vermieden werden. Mit dem Tiefenschärfetester kann sehr genau die Objektverschiebung bestimmt werden, ab der ein unakzeptables Bild entsteht. Die Definition eines unakzeptablen Bildes hängt vom Betrachter und der Anwendung ab. Der Tiefenschärfetester DOF 5-15 besteht aus zwei Skalen. Jede Skala besteht (bei Betrachtung unter 45°) aus horizontalen und vertikalen Linien mit einer Frequenz von 5 und 15 Linienpaaren pro Millimeter. Anleitung inklusive.


Technische Informationen

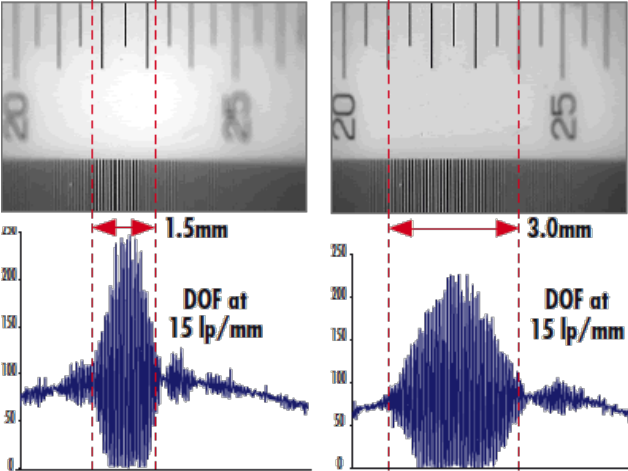
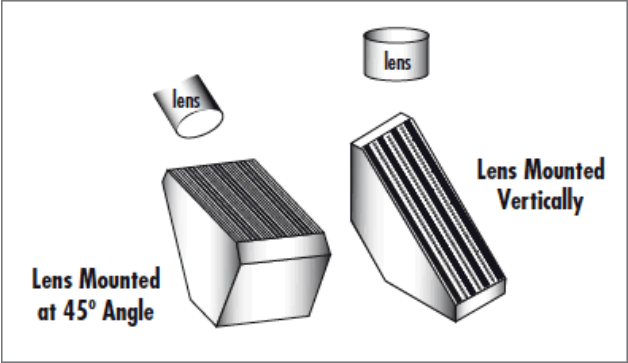


Line spread functions of ruling. Taken with VZM™ 200i at 1X PMAG.
Left: Iris Open. Right: Iris Half Open.

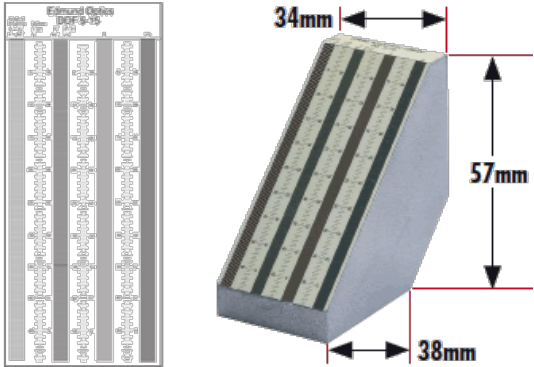

Click the image below for an enlarged downloadable file.

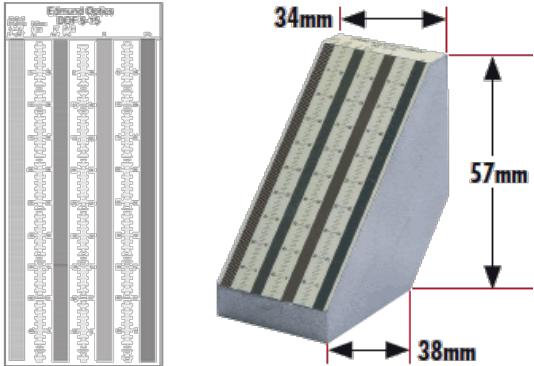

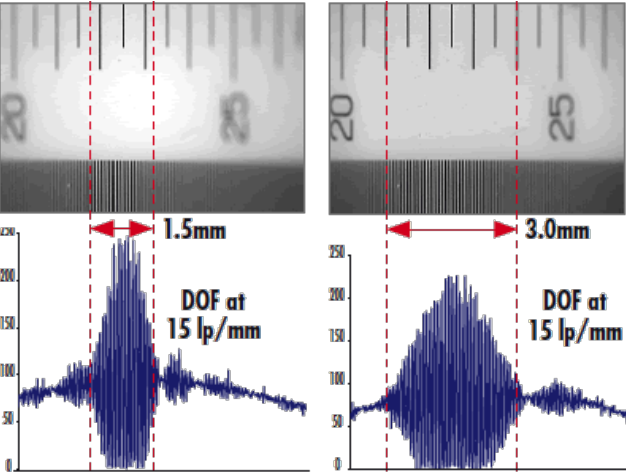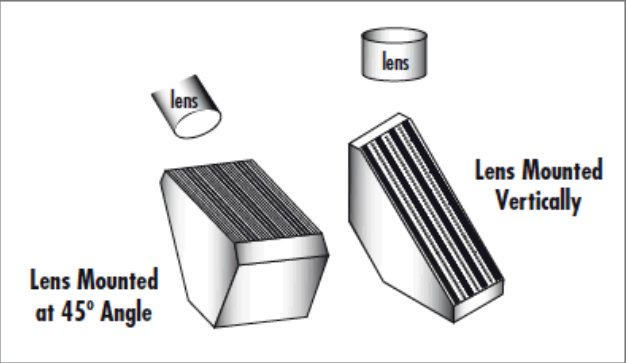

Line spread functions of ruling. Taken with VZM™ 200i at 1X PMAG.
Left: Iris Open. Right: Iris Half Open.