

Tubuslinse mit einem Port für NIR, 180 mm Brennweite

Mehr Produkte von [Olympus](#)



Olympus Compact Tube Lens, 180mm Focal Length

Produkt **#75-251** NEU **1 In Stock**

-

1

+

€1.240⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.240,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
U-TLUIR-1-2 / 3-U840IEC	Modellnummer:
Tube Lens	Typ:
Olympus	Hersteller:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	

350	Gewicht (g):
Optische Eigenschaften	
180.00	Brennweite BW (mm):
1X	Vergrößerung:
400 - 1000	Wellenlängenbereich (nm):
22.0	Feldzahl:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Leere Filterwürfel und [vormontierte Würfel mit Fluoreszenzfiltern](#) verfügbar
 - Weitwinkel-Tubulinse und Tubulinse mit einem Port
 - Schwach fluoeszierendes Immersionsöl für [Objektive mit großer NA](#)
 - C-Mount und T-Mount Adapter sowie Kamera-Koppler für die Systemintegration
- Olympus Tubuslinsen und Zubehör wurden speziell für den Einsatz mit Mikroskopen oder Objektiven der Marke Olympus entwickelt.


Der leere Filterwürfel ist für [Anregungs- und Emissionsfilter](#) mit 25 mm Durchmesser und [dichroitische Filter](#) mit 25,2 x 35,6 mm Größe geeignet und dient für kundenspezifische Fluoreszenz-Aufbauten. Der Filterwürfel [#86-832](#) ist kompatibel mit den Olympus Mikroskopserien BX2 (BX61/51/41) und IX2 (IX81/71/51). Der Filterwürfel [#86-833](#) ist kompatibel mit den Olympus Mikroskopserien BX3 (BX63/53/43) und IX3 (IX83/73/53). Die [vormontierten Fluoreszenz-Filterwürfel](#) verwenden den Würfel [#86-833](#) und sind für verschiedene Standardfluorophore verfügbar.

Die Olympus Tubuslinsen haben eine Brennweite von 180 mm. Die Olympus Weitwinkel-Tubulinse ([#36-401](#)) bietet einen großen Bildkreis mit 26,5 mm Durchmesser und kann einfach über die Halterung [#11-149*](#) (Olympus Weitwinkel-Tubulinse auf T-Mount) in T-Mount Systeme integriert werden. Die Olympus Tubulinse mit einem Port ([#86-835](#)) hat einen kleineren Bildkreis mit 22 mm Durchmesser und wurde für die einfache Integration in Mikroskop-Beobachtungstuben für Videoaufnahmen entwickelt. Mt der Tubulinse [#86-835](#), dem Olympus C-Mount Adapter [#89-606](#) und dem Olympus 1X Kamera-Koppler [#89-605](#) kann ein C-Mount Video-Mikroskop aufgebaut werden.

Das schwach fluoeszierende Immersionsöl von Olympus ([#86-834](#)) wurde für die Verwendung mit Öl-Immersionsobjektiven entwickelt, um hohe numerische Aperturen zu erreichen. Das Immersionsöl wurde speziell so entwickelt, dass die für Öl typische Autofluoreszenz reduziert ist. Dies macht das Öl zur idealen Wahl für die Fluoreszenzmikroskopie.

***Bitte beachten Sie:** Die vier Inbusschrauben müssen entfernt werden, um die [#36-401](#) Olympus Weitwinkel-Tubulinse in die Halterung [#11-149](#) (Olympus Weitwinkel-Tubulinse auf T-Mount) einzusetzen. Siehe technische Abbildungen.

Technische Informationen

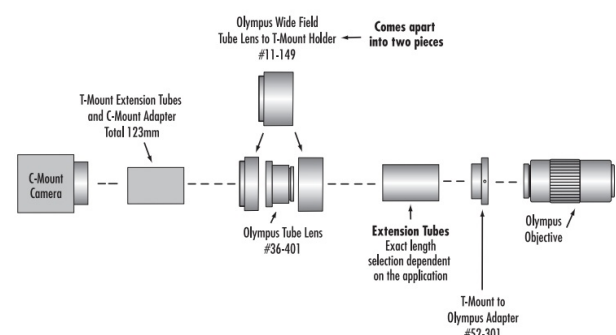

Using Olympus Objectives with C-Mount Cameras

